

Broncoscopio con resolución full HD

Gran capacidad de succión y
maniobrabilidad mejorada



LoopView®

Broncoscopio flexible digital de un solo uso

B38 series | B50 series | B58 series

S13

ViewHub®
Monitor de vídeo




IES MEDICAL
Innovation for better care

1 Incomparable Broncoscopio

Resolución Full HD

HD

- Cámara de alta resolución con algoritmo exclusivo
- Anatomía pulmonar realista y reproducción precisa del color
- Menor riesgo de errores de interpretación y manejo


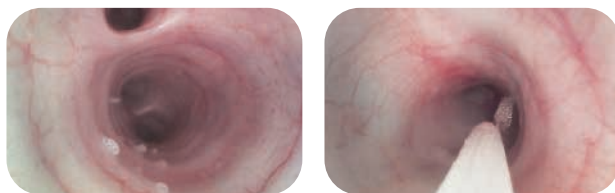


Gran capacidad de succión



- Canal de trabajo de mayor diámetro con una eficiencia de succión superior
- Compatible con el instrumental médico habitual

- Eliminación más fácil de las secreciones de las vías respiratorias, incluso con el instrumental en el canal de trabajo

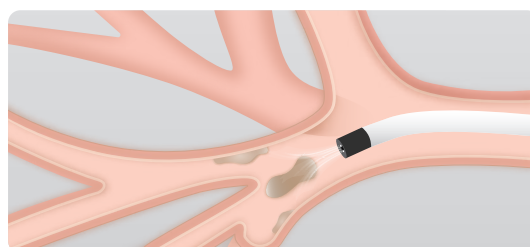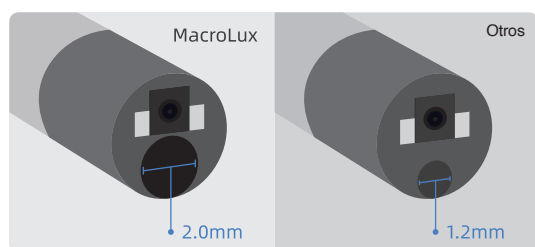

Excelente maniobrabilidad



Fácil acceso al
lóbulo superior
180° (arriba y abajo)



Mango ergonómico

Diseño con fijación
de tubo endobronquial

3 series, 3 opciones

Neumología, Anestesia,
UCI, Urgencias y otros
servicios médicos



B50 4.8/2.2 | Funcionamiento normal

- Canal de trabajo de mayor diámetro con una eficiencia de aspiración superior
- Múltiples aplicaciones: aspiración de esputo lavado broncoalveolar (BAL), biopsia, administración de fármacos, etc.

B38 3.8/2.0 | Manejo de vía aérea

- Intubación difícil, tubo endotraqueal de doble luz
- Observación del bronquio distal
- Tubo de inserción delgado con canal de trabajo de mayor diámetro

B58 5.5/2.8 | Terapia intervencionista

- Gran canal de trabajo para instrumentos de mayor tamaño
- Solución para todo tipo de tratamientos del servicio de neumología

1 sistema para todo

LoopView®


B38 series | B50 series | B58 series

**Fácil de manejar en distintos
escenarios clínicos**

ViewHub® S13

Solución integrada para todos los
procedimientos diagnósticos y
terapéuticos.

Compatible con todos los tamaños de
broncoscopios estériles de un solo uso
de la serie B de LoopView®, así como
con toda la gama de endoscopios
digitales de un solo uso de Macrolux.

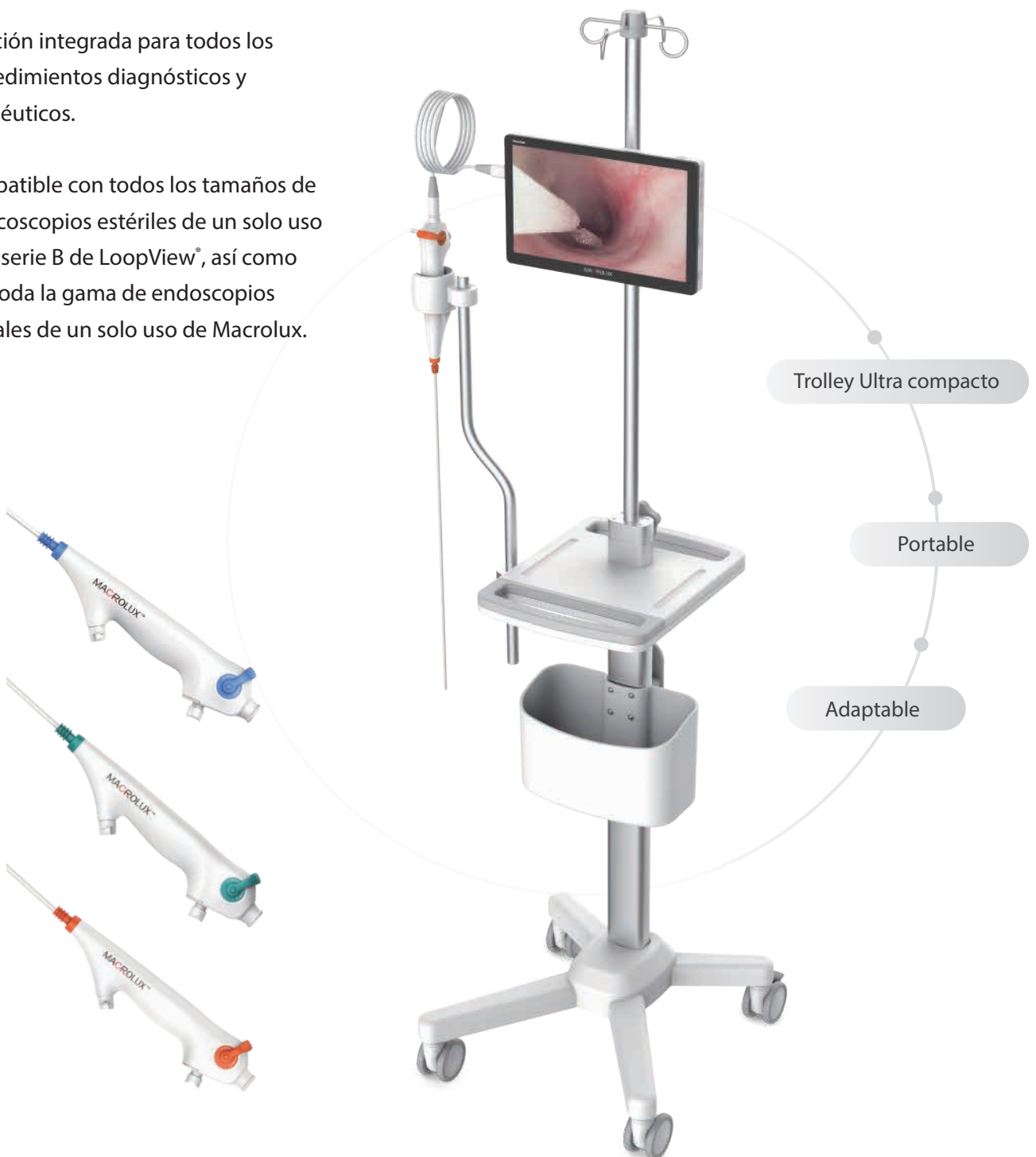

S13

ViewHub[®]
Monitor de vídeo



LoopView®

Broncoscopio flexible digital de un solo uso




S13 | ViewHub

Monitor de vídeo



S13


ViewHub[®] Monitor de Vídeo

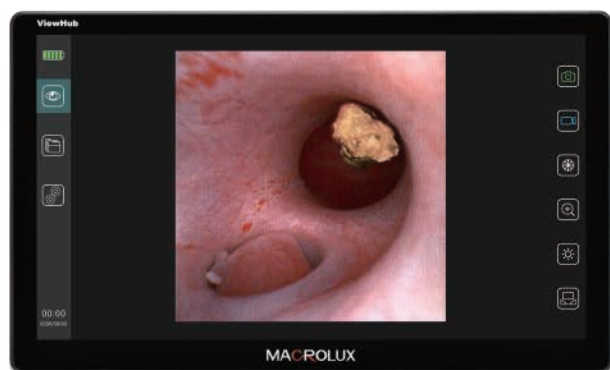

Óptica Full HD
pantalla táctil



Monitor anti-reflejos

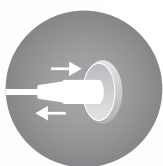

Enchufe Plug and Play



Cristal anti-huellas



Función de grabación
de vídeo y audio



LoopView®

Broncoscopio flexible digital de un solo uso

B38 series | B50 series | B58 series



Especificaciones:				
Series:		B38/B38-C	B50/B50-C	B58/B58-C
Broncoscopio	Diámetro distal y externo	4.2mm	5.4mm	6.3mm
	Diámetro exterior del tubo de inserción	3.8mm	4.8mm	5.5mm
	Longitud del canal de trabajo	600mm		
Canal de trabajo	Diámetro del canal de trabajo	2.0mm	2.2mm	2.8mm
	Longitud total	750mm		
Sección de pliegue	Rango de angulación	180° hacia arriba / 180° hacia abajo		
Sistema óptico	Campo de visión	125°		
	Dirección de visión	0°		
	Profundidad de campo	3-100mm		
	Tipo de iluminación	LED		

S13 | ViewHub

Monitor de vídeo

Especificaciones:		
Modelo		S13
Alimentación eléctrica	Voltaje	AC 100 V – 240 V
	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Consumo eléctrico	200VA
Resolution	Resolución	1920*1080 pixels
Salida y entrada digital	Salida y entrada digital	HDMI
Tamaño	Dimensiones	324 (D) x 200 (W) x 44 (H) mm
	Peso	2 kg
Pantalla	Tamaño	13.3 Pulgadas
	Tipo	TFT LCD
Clasificación (Equipamiento médico eléctrico)	Tipo de protección contra descarga eléctrica	Protección clase I
	Clasificación IP	IPX0
Memoria	Memoria	128GB
Funciones	Funciones	Captura pantalla, grabación de vídeo Control de brillo, balance de blancos Zoom de imagen, Congelar imagen Gestión de imagen, cambio de modo de imagen Optimización de imagen

CONTACTO:

IES MEDICAL® Bizkaia Science and Technology Park,
Ibaizabal bidea, 500. 48160 Derio - Bizkaia

T. +34 944 008 847

comercial@iesmedical.es
www.iesmedical.es

MACROLUX

IES MEDICAL
Innovation for better care

